


Pédale de commande à levier A-dec

Présentation

La pédale de commande régule l'air de commande acheminé jusqu'à l'instrument actif et procure un signal qui active l'air refroidisseur et l'eau de refroidissement.

Le bouton d'accessoire/soufflette permet d'activer un accessoire ou la soufflette. La soufflerie envoie un jet d'air à travers l'instrument sans activer la fraise de l'instrument. La fonction d'accessoire varie selon l'accessoire intégré. Pour obtenir plus d'informations, contacter un distributeur A-dec agréé.

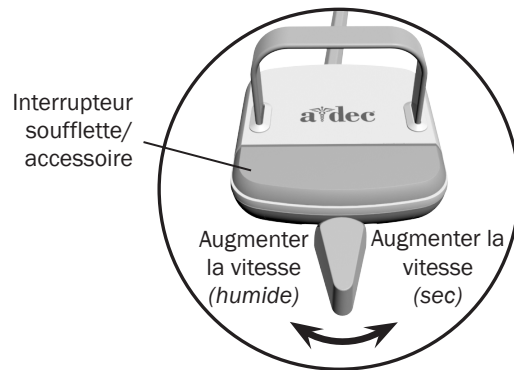

Activation et fonctionnement des instruments

Pour activer un instrument, le retirer de son support ou tirer le fouet vers l'avant. Utiliser la pédale de commande pour réaliser l'opération souhaitée avec l'instrument.

| Action | Procédure |
|---|--|
| Actionner un instrument avec eau de refroidissement | Déplacer le levier vers la gauche. Amplifier le mouvement pour augmenter la vitesse. |
| Actionner un instrument sans eau de refroidissement | Déplacer le levier vers la droite. Amplifier le mouvement pour augmenter la vitesse. |
| Actionner l'accessoire ou la soufflette en option | Appuyer sur l'interrupteur soufflette/accessoire.* |
| Déclencher la caméra intra-buccale | Déplacer le levier vers la gauche ou la droite pour capturer une image.* |

* Pour toute question sur le fonctionnement ou la configuration des accessoires A-dec intégrés, contacter un distributeur A-dec agréé.



REMARQUE La fonction associée à la pédale de commande peut être inversée par un technicien (vers la gauche pour sec, vers la droite pour humide). Pour obtenir plus d'informations, contacter un distributeur A-dec agréé.



REMARQUE Pour obtenir plus d'informations sur le réglage des instruments, se reporter au mode d'emploi fourni avec l'unit.

Caractéristiques et garantie

Les informations relatives à la garantie sont fournies dans le document *Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie* (réf. 86.0221.01), disponible dans la bibliothèque de documents à l'adresse www.a-dec.com.



Siège social d'A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
États-Unis
Tél. : 1 800 547 1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : +1 503 538 7478 hors des États-Unis/Canada
Fax : 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australie

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australie
Tél. : 1 800 225 010 en Australie
Tél. : +61 (0)2 8332 4000 hors de l'Australie

A-dec Chine

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Chine
Tél. : +1 503 538 7478

A-dec Royaume-Uni

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Angleterre
Tél. : 0800 ADECUK (233285) au Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 hors du Royaume-Uni

86.0559.01 Rev. B
Copyright 2015 A-dec Inc.
Tous droits réservés.