

**A-dec ICX Restore Solution 1 and Solution 2** is a specially formulated dental unit waterline shock treatment. It is intended to remove build-up of contamination from the waterlines. Easy to use and no diluting required. Always use ICX Restore Solution 1 and 2 together. Do not add water. This product is to be used in conjunction with regular testing of dental unit water.

**NOTE** Do not use with a waterline maintenance cartridge or straw.

**DIRECTIONS FOR USE. Always use Solution 1 and 2 together.**

### Applying ICX Restore to a Dental Unit's Waterlines

1. Turn off the delivery system master toggle; then remove and empty the water bottle.
2. Remove air/water syringe tips, handpieces, detachable motors and couplers, and ultrasonic instruments from their tubing.
3. Add one bottle (118 mL) of ICX Restore Solution 1 and one bottle (118 mL) of ICX Restore Solution 2 into the empty water bottle.
4. Cover the opening of the water bottle and carefully swirl the solution, coating all surfaces of the water bottle.
5. Reattach the water bottle to the unit and turn on the master toggle.
6. Run ICX Restore through the system until the blue solution flows out of the air/water syringe(s), all of the handpiece tubing and the cuspidor's cupfill waterline. Leave remaining solution in the water bottle.
7. Turn off the master toggle and allow the solution to remain in the unit for 12 to 96 hours.

**NOTE** Place a cloth or paper towel underneath the handpiece tubing to catch potential drips.

8. After 12 to 96 hours, turn on the master toggle and flush remaining ICX Restore solution through all air/water syringe(s), all handpiece tubing, and the cupfill waterline.
9. Turn off the master toggle, remove the water bottle, discard any remaining solution, and thoroughly rinse the bottle with water.
10. Refill the bottle with water, reattach it to the unit; then turn on the master toggle.
11. Completely flush all air/water syringe(s) and all handpiece tubing into a sink or cuspidor, and run the cupfill until the water is clear and the bottle is empty.
12. Once treatment with ICX Restore is completed, add an ICX® tablet to the water bottle and refill it with water.

**IMPORTANT.** For **new equipment**, apply one treatment before initial use. For **existing equipment**, apply three treatments when your water quality test results exceed your water quality action level. You may use the dental unit between treatments. For proactive preventive maintenance, you may apply one treatment on a routine basis.

### SOLUTION 2

**WARNING** Causes eye irritation.

### PRECAUTIONS

**IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice.

## **STORAGE AND DISPOSAL. Solutions 1 and 2:**

**Product Storage.** Keep the product in the closed original container when not in use. Store in a cool, dry area away from potential sources of heat, open flames, sunlight or other chemicals. Store between 5 °C (41 °F) and 30 °C (86 °F).

**Product Disposal.** Wastes resulting from the use of this product must be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

**Container Handling.** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer container for recycling if available or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration.

**Regulatory Information and Warranty:** For required regulatory Information and the *A-dec warranty*, see the *Regulatory Information, Specifications, and Warranty* document (p/n 86.0221.00) available in the Resource Center at [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).

A-dec, A-dec 360, the A-dec logo, and ICX Restore are trademarks or registered trademarks of A-dec, Inc. in the U.S. and other countries.



Manufactured for A-dec.

Reorder #: 90.1821.01

L'ensemble de **Solutions ICX Restore 1 et 2 d'A-dec** constitue un traitement de choc spécialement élaboré pour les circuits d'eau des unités dentaires. Il est conçu pour éliminer l'accumulation de résidus dans les circuits d'eau. Simple à utiliser, sans nécessiter de dilution. Toujours utiliser les Solutions ICX Restore 1 et 2 ensemble. Ne pas ajouter d'eau. Ce produit doit être utilisé en conjonction avec une analyse régulière de l'eau de l'unité dentaire.

**REMARQUE :** ne pas utiliser avec une cartouche d'entretien des circuits d'eau ou une paille.

### **CONSIGNES D'UTILISATION. Toujours utiliser les Solutions 1 et 2 ensemble.**

#### **Appliquer ICX Restore sur les circuits d'eau d'une unité dentaire**

1. Désactiver l'interrupteur principal du système d'alimentation, puis retirer et vider la bouteille d'eau.
2. Retirer les embouts des seringues à air/eau, les instruments, les moteurs et adaptateurs détachables et les instruments à ultrasons de leur tube.
3. Ajouter un flacon (118 mL) de la solution ICX Restore 1 et un flacon (118 mL) de la solution ICX Restore 2 dans la bouteille d'eau vide.
4. Couvrir l'ouverture de la bouteille d'eau et remuer légèrement la solution pour la répandre sur toute la surface de la bouteille.
5. Replacer la bouteille d'eau sur l'unité et activer l'interrupteur principal.
6. Diffuser ICX Restore dans le système jusqu'à ce que la solution bleue s'écoule en dehors des seringues à air/eau, de tous les tubes d'instrument et du circuit d'eau du système de remplissage du gobelet du crachoir. Laisser la solution restante dans la bouteille d'eau.
7. Désactiver l'interrupteur principal et laisser agir la solution dans l'unité pendant 12 à 96 heures.

**REMARQUE :** placer un chiffon ou une serviette en papier sous les tubes des instruments pour recueillir les écoulements éventuels.

8. Après 12 à 96 heures, activer l'interrupteur principal et vider le reste de la solution ICX Restore à travers toutes les seringues à air/eau, tous les tubes d'instrument et le circuit d'eau du système de remplissage de gobelet.
9. Désactiver l'interrupteur principal, retirer la bouteille d'eau, jeter toute solution restante et rincer abondamment la bouteille avec de l'eau.
10. Remplir la bouteille d'eau, la replacer sur l'unité et activer l'interrupteur principal.
11. Rincer entièrement toutes les seringues à air/eau et tous les tubes d'instrument dans un évier ou un crachoir, et faire fonctionner le système de remplissage de gobelet jusqu'à ce que l'eau soit claire et que la bouteille soit vide.
12. À la fin du traitement avec ICX Restore, ajouter un comprimé ICX<sup>MD</sup> dans la bouteille d'eau et la remplir d'eau.

**IMPORTANT.** Pour un **nouvel équipement**, appliquer la solution de traitement une fois avant la première utilisation. Pour un **ancien équipement**, appliquer la solution de traitement trois fois si les résultats de l'analyse de la qualité de l'eau dépassent le seuil d'intervention de qualité de l'eau. Vous pouvez utiliser l'unité dentaire entre les traitements. Pour un entretien préventif proactif, vous pouvez appliquer régulièrement un traitement.

#### **SOLUTION 2**

**AVERTISSEMENT** Provoque une irritation des yeux.

## PRÉCAUTIONS

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer doucement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, et si possible. Continuer le rinçage. Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin.

## RANGEMENT ET ÉLIMINATION. Solutions 1 et 2 :


**Rangement du produit.** Garder le produit dans le conteneur d'origine fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Garder dans un endroit sec et frais à l'écart de sources potentielles de chaleur, de flammes nues, de la lumière du soleil ou d'autres produits chimiques. Conserver entre 5 °C (41 °F) et 30 °C (86 °F).

**Élimination du produit.** Les déchets résultant de l'utilisation de ce produit doivent être éliminés sur le site ou dans une installation d'élimination des déchets approuvée.

**Gestion des conteneurs.** Conteneur non rechargeable. Ne pas réutiliser ou remplir plusieurs fois ce conteneur. Envoyer le conteneur au recyclage, le cas échéant, ou le perforer et l'éliminer dans une décharge sanitaire ou par incinération.

**Renseignements réglementaires et garantie :** pour obtenir les renseignements réglementaires nécessaires et en savoir plus sur la *garantie d'A-dec*, consulter le document sur les renseignements réglementaires, les spécifications et la garantie (réf. 86.0221.00) disponible dans le Centre de ressources sur le site [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).

A-dec, A-dec 360, le logo A-dec et ICX Restore sont des marques commerciales ou des marques déposées d'A-dec, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

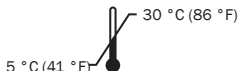

Fabriqué au nom d'A-dec.

N° de la nouvelle commande : 90.1821.01

  
reliablecreativesolutions®

 **A-dec Headquarters**

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132  
United States  
Tel: 1.800.547.1883 within USA/CAN  
Tel: +1.503.538.7478 outside USA/CAN  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)



86.0947.00 Rev A  
Date of Issue 2021-06-10  
Copyright 2021 A-dec, Inc.  
All rights reserved