

A-dec® スツール
治療用に作られたス



a dec®

A-dec 500 パフォーマンスツール

デンタルチームにとって最高の快適さ

患者に最高の治療を施せるのは、快適に作業できるときです。人間工学に基づいた、ユニークなツールにより、今まさにそれが可能となりました。そのツールは、A-dec 500 です。

革新的な A-dec 500 ツールは、長年の研究の末、最高に快適に感じられるように戦略的な設計がなされているため、最高の治療が施せるようになるのです。






A-dec 521 歯科医師用ツール

A-dec 522 歯科助手用ツール

健康的な姿勢を支えるツール

A-dec 500 ツールは、身体に適合して動くように設計されています。たとえば、そのダイナミックなシート。サスペンションフレームから、柔軟で身体に適合する素材までのすべての目的は、快適にサポートすることです。簡単に利用できるパドルによって調整が可能になり、完全にカスタマイズできるため、人間工学的に健康的な姿勢を一日中保つことができます。

健康的な着座姿勢

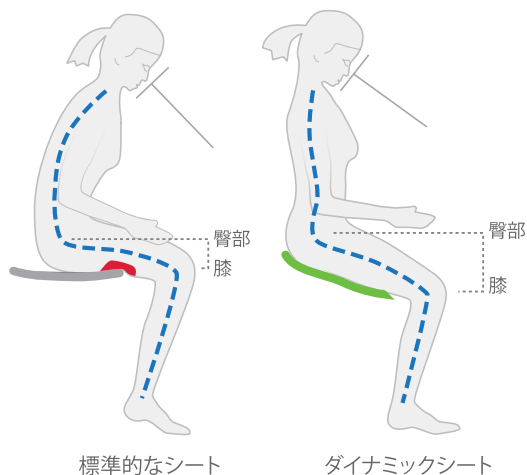

人間工学的なニーズを満たすには、最初に座り方を調整し、背骨がc字型になってダメージを受けることを避けます。この健康的な着座姿勢は、「アスレチックスタンス」と呼ばれます。臀部を膝より高くして座り、背板を低くして前に出すと、背骨が健康的なS字型を保てるようになります。このダイナミックなシートによって快適になり、作業効率も上がります。

4か所で調整可能



正しい姿勢をとると、関節と背骨にかかる圧力が下がり、手足の血液循環がよくなります。A-dec 500 ツールには、分かりやすい番号の付いたパドルが装備されており、1日をとおして段階的にカスタマイズした調整ができるようになっています。ユーザーが複数いる場合は、これが特に重要となります。

ダイナミックなシートシステム



三層構造の柔軟なシートが、あらゆる移動や動きに適合します。

- 1. クッションフォーム (上層) :**最終的に快適さを形にする層。
- 2. 快適で柔軟な補強部 (中層) :**4つのパフォーマンスゾーンに基づき、表面を身体に適合させます。
- 3. 柔軟なフレーム (下層) :**大きい動きを支持します。

A-dec 500 ツール

ダイナミックサポート

機能豊富な A-dec 500 ツールのシートシステムはダイナミックであり、ユニークなパフォーマンスゾーンは体形に適合します。このパフォーマンスゾーンは調和して働き、ユーザーは、移動しても、上体を曲げて、作業していても、継続して支えられます。曲線状の背板などのその他の特徴により、背骨は支えられて最高に快適になります。A-dec の人間工学に則したツールを使用すると、最も大切なもの、つまり患者に集中できます。

	歯科医師用ツール A-dec 521	歯科助手用ツール A-dec 522
ダイナミックなシートシステム	・	・
非常に静かなキャスター	・	・
曲線状の背板	・	オプション
シートの傾斜調整	・	オプションの背板でのみ可能
スイングアームレスト	オプション	
高さを調整できるフットリング		・
フットペダスタル		オプション



A-dec 521
歯科医師用ツール



非常に静かなキャスター
独自の設計により、カーペットでも硬い床でも、動きが滑らかで非常に静かです。



調整機能
番号の付いたパドルを簡単に利用し、迅速に調整したり、簡単に清掃したりすることができます。



背板の高さ調整
プッシュボタンを利用し、片手で簡単に調整できます。

A-dec 521 歯科医師用ツール 適切な高さ調整

ツールの高さを適切にするため、臀部から足までの長さを測定してください。

86.36 cm 以上：シリンダー（高）を選択
86.36 cm 以下：シリンダー（低）を選択



A-dec 522 歯科助手用ツール (オプションの
フットペDESTALと背板つき)



A-dec 521 歯科医師用ツール (オプション
のスイングアームレストつき)



A-dec 500 ツール オプションとアクセサリ

オプションのスイングアームレスト

幅、高さ、回転角度の3つを調整でき、ユーザーは
確実に支えられて移動しやすくなります。

- 腕を載せて口腔で作業できます。
- アームレストを簡単にスライドさせて片づけられます。
- アームレストの高さを調整できます。



オプションのフットペDESTAL

フットリングと交換し、さらに適切に体
重をシートから足に分散して「アスレチック
クスタンス」にします。

A-dec 400 スツール

象徴的な耐久性

ユーザーにはスツールに快適に座って作業する価値がありますが、それが長続きすることも必要です。長年にわたって A-dec は、耐久性の高いスツールによって、歯科医療従事者が健康的な姿勢で座って作業できるようにしてきました。解剖学に則った形状の背板、調整可能な胴体サポート、シートの端の丸め、人間工学に基づいた傾斜などの特徴により、椎間板にかかる圧力は下がり、筋肉痛は軽減されます。

縫合式カバーまたはシームレスカバーを広範なカラーパレットから、オフィスに合わせて選択してください。次のスツールの購入も A-dec でお願いします。A-dec があなたをサポートいたします。

	A-dec 421 歯科医師用スツール	A-dec 422 歯科助手用スツール
曲線状の背板	•	
曲線状のシート	•	•
人間工学に基づいた傾斜	•	
調整可能な胴体サポート		•
利用しやすい調整レバー	•	•
高さを調整できるフットリング		•

注：A-dec 400スツールには、ダイナミックシーティングシステムが装備されていません。A-dec 500スツールラインには標準で装備されます。

A-dec 422
歯科助手用スツール

A-dec 421 歯科医師用スツール



A-dec 421 歯科医師用スツール 適切な高さ調整

スツールの高さを適切にするため、臀部から足までの長さを測定してください。

81.28 cm 以上：シリンダー（高）を選択
81.28 cm 以下：シリンダー（低）を選択



カバーとカラーオプション

色調について

カラーによってオフィスに個性を反映させてください。幅広いカラーから、A-dec 421 と A-dec 422 のシームレスカバーまたは縫合式カバーをお選びください。A-dec 521 と A-dec 522 では縫合式オプションのみが利用可能です。ご参考までに a-dec.com/InspireMe をご覧ください。


縫合式カバー (A-dec 500ツールおよびA-dec 400ツールで利用可能)



シームレスカバー (A-dec 400ツールで利用可能)



サンプルは a-dec.com/Color からご依頼ください。

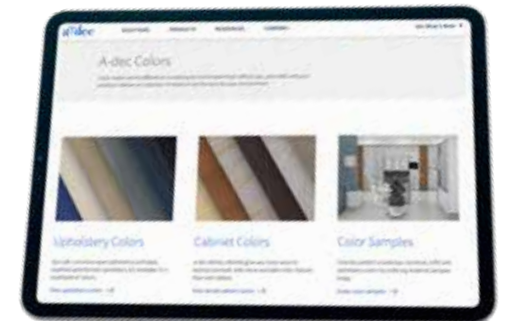

実際の色は異なります。色サンプルや最新の製品情報については、A-decの正規販売代理店にご連絡ください。



a|dec



A-dec 本社

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
電話：1.800.547.1883 米国 / カナダ国内
電話：+1.503.538.7478 米国 / カナダ国外
ファックス：+1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

電話：1.800.225.010 オーストラリア国内
電話：+61.(0)2.8332.4000 オーストラリア国外

A-dec Cina

電話：400.600.5434 中国内
電話：+86.571.89026088 中国外

A-dec United Kingdom

電話：0800.233285 英国内
電話：+44.(0).24.7635.0901 英国外

[a-dec.com/500stools](https://www.a-dec.com/500stools)では、人間工学に基づいた、A-decのツールルについて詳しく調べたり、人間工学の評価の補足情報を請求したりすることができます。

ここに表示されている製品の色や形態は実際の素材とは異なることがあり、また予告なく変更される場合があります。正確な色サンプルや最新の製品情報については、A-decの正規販売代理店にご連絡ください。

©2023 A-dec, Inc. All rights reserved.
85.6072.05 / PP/700/9-19(2-23)/Rev D5