

Stools

A-dec® Stools

*Seggiolini creati per
elevate prestazioni*



Performance Stools A-dec 500.

Comfort straordinario per l'equipe odontoiatrica

Lavorare confortevolmente è fondamentale per fornire le migliori cure ai pazienti.

E da oggi è possibile grazie a una straordinaria soluzione ergonomica: A-dec 500.

Frutto di anni di ricerca, l'innovativo seggiolino A-dec 500 è stato progettato per offrirvi il massimo comfort, condizione essenziale per lavorare al meglio.






Seggiolini che favoriscono una corretta postura.

I seggiolini A-dec 500 sono stati disegnati per adattarsi al vostro corpo. Considerate ad esempio il seggiolino dinamico. Ogni elemento che lo compone, dal telaio di sostegno ai materiali flessibili che prendono la forma del corpo, ha uno scopo ben preciso: assicurare comfort e supporto. Le leve di regolazione, di facile accesso, consentono di effettuare le regolazioni necessarie per personalizzare la seduta e mantenere una postura corretta per tutto il giorno.

Seduta posturalmente corretta

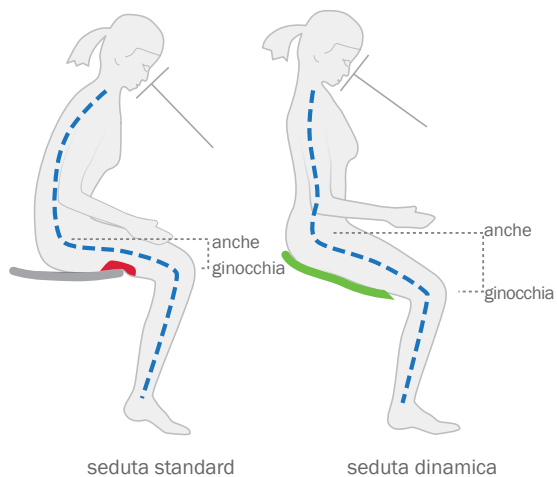

La risposta che diamo alle vostre esigenze in fatto di ergonomia parte da una seduta corretta, che eviti la dannosa curvatura a C della colonna vertebrale. La seduta posturalmente corretta viene indicata come "seduta dinamica". Per mantenere da seduti la corretta forma a S della colonna vertebrale, è necessario che le anche si trovino al di sopra delle ginocchia e lo schienale sia leggermente inclinato in avanti. La seduta dinamica offre comfort e vi consente di lavorare meglio.

Quattro punti di regolazione



Una postura corretta riduce lo stress su articolazioni e colonna vertebrale, oltre a migliorare la circolazione di piedi e estremità. I seggiolini A-dec 500 sono dotati di leve di regolazione numerate facilmente leggibili che consentono di ottimizzare la posizione in base alle proprie esigenze.

Sistema di seduta dinamico



Tre diversi strati flessibili permettono alla seduta di adattarsi a ogni minimo movimento e spostamento del corpo:

- 1. Cuscino imbottito** (strato superiore): l'ultimo livello di comfort.
- 2. Armatura Comfort-flex** (centrale): crea una superficie che si modella in base al peso e alle dimensioni del corpo grazie a quattro aree a diversa flessibilità.
- 3. Telaio flessibile** (base): sostiene i movimenti più macroscopici del corpo.

Seggiolini A-dec 500

Supporto dinamico

I seggiolini A-dec 500 sono dotati di numerose funzionalità e un sistema di seduta dinamica con aree a flessibilità differenziata che si modellano in base alla forma del corpo. Queste aree lavorano all'unisono per garantire il corretto supporto quando ci si muove, ci si inclina e durante tutte le operazioni di lavoro. Le altre caratteristiche, come lo schienale sagomato, offrono il corretto supporto e il massimo comfort alla colonna vertebrale. Grazie alla seduta ergonomica di A-dec, potete focalizzarvi su ciò che più conta: il paziente.

	Seggiolino dentista A-dec 521	Seggiolino assistente A-dec 522
Sistema di seduta dinamico	•	•
Rotelle silenziose	•	•
Schienale sagomato	•	opzionale
Regolazione inclinazione seduta	•	solo con schienale opzionale
Braccioli girevoli	opzionali	
Anello poggipiedi regolabile in altezza		•
Pedana		opzionali



Seggiolino dentista
A-dec 521



Seggiolino assistente
A-dec 522



Rotelle silenziose

Il design consente spostamenti facili e ultra-silenziosi su qualsiasi tipo di pavimento.



Leve di regolazione

Le leve numerate, semplici da trovare, permettono regolazioni rapide e facilitano le operazioni di pulizia.



Regolazione altezza schienale

L'apposito pulsante permette facili regolazioni con una sola mano.

Seggiolino dentista A-dec 521 Individuate il seggiolino giusto

Per scegliere l'altezza corretta del seggiolino, prendete la misura dalle anche ai piedi.

Oltre 86,36 cm: cilindro alto
Sotto 86,36 cm: cilindro standard



Dall'anca ai piedi

Seggiolino assistente A-dec 522 con base di appoggio per i piedi e schienale opzionali



Seggiolino assistente A-dec 522 con pedana e schienale opzionali



Pedana opzionale

Sostituisce l'anello poggiapiedi per meglio distribuire il peso verso i piedi per una "seduta dinamica".

Seggiolini A-dec 500 Opzioni e accessori

Braccioli girevoli opzionali

La regolazione della loro larghezza, altezza e rotazione ottimizza il sostegno e consente la massima mobilità.

- Potete riposare le braccia mentre lavorate nella cavità orale
- Potete ruotarli per alzarvi"
- Potete regolarne l'altezza"



Seggiolini A-dec 400

Icone di robustezza

Oltre a offrire un adeguato comfort, un seggiolino deve anche durare nel tempo. Sono ormai anni che le nostre soluzioni offrono ai dentisti professionisti la postura seduta corretta. Caratteristiche come lo schienale anatomico, il sostegno regolabile del busto, i bordi arrotondati e l'inclinazione ergonomica della seduta riducono la pressione sui dischi intervertebrali e i dolori muscolari.

Selezionate la tappezzeria Plus o in termoformato scegliendo dalla vasta gamma di colori che farà sicuramente da complemento al vostro studio. Scegliete un seggiolino A-dec: siamo qui per supportarvi.

	A-dec 421 Seggiolino dentista	A-dec 422 Seggiolino assistente
Schienale sagomato	•	
Seduta sagomata	•	•
Inclinazione seduta	•	
Supporto busto regolabile		•
Leve di regolazione di facile accesso	•	•
Anello poggipiedi regolabile in altezza		•

Nota: i seggiolini A-dec 400 non sono dotati del sistema di seduta dinamico disponibile con la linea 500.

Seggiolino assistente
A-dec 422

Seggiolino dentista
A-dec 421



Seggiolino dentista A-dec 421 Individuate il seggiolino giusto

Per scegliere l'altezza giusta del seggiolino, prendete la misura dalle anche ai piedi.

Oltre 81,28 cm: cilindro alto
Sotto 81,28 cm: cilindro standard



Opzioni tappezzeria e colori

Tutta una questione di colore

Sbizzarritevi con i colori per creare uno studio che rifletta veramente la vostra personalità. Scegliete i colori da una vasta gamma a disposizione sia per tappezzeria in termoformato che Plus per A-dec 421 e A-dec 422. Tappezzeria Plus disponibile solo nei modelli A-dec 521 e A-dec 522. Lasciatevi ispirare da a-dec.com/InspireMe.


Tappezzeria Plus (disponibile solo per i seggiolini A-dec 500 e A-dec 400)



Tappezzeria in termoformato (disponibile per i seggiolini A-dec 400)



Ordinate i campioni dal sito
a-dec.com/Color

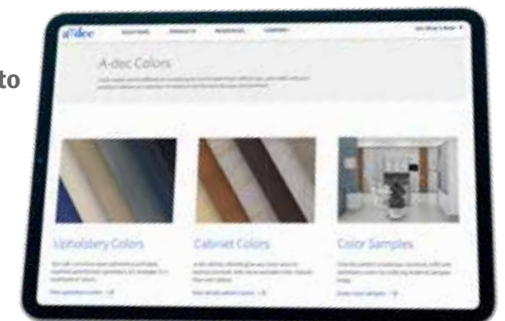

I colori rappresentati potrebbero non riprodurre fedelmente quelli reali. Rivolgetevi al rivenditore autorizzato A-dec per ottenere campioni colore e le informazioni più recenti sui prodotti.



A-dec Sede centrale

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 negli USA/Canada
Tel: +1.503.538.7478 fuori da USA/Canada
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 solo Australia
Tel: +61.(0)2.8332.4000 fuori dall'Australia

A-dec Cina

Tel: 400.600.5434 solo Cina
Tel: +86.571.89026088 fuori dalla Cina

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.2332.85 solo Regno Unito
Tel: +44.(0).24.7635.0901 fuori dal Regno Unito



Per ulteriori informazioni sui seggiolini ergonomici A-dec o per richiedere una visita di valutazione ergonomica gratuita visitate [a-dec.com/500stools](https://www.a-dec.com/500stools).

I colori rappresentati in questa brochure potrebbero non riprodurre fedelmente quelli reali e potranno subire modifiche senza preavviso. Rivolgetevi al rivenditore autorizzato A-dec per ottenere campioni colore e le informazioni più recenti sui prodotti.

©2023 A-dec, Inc. Tutti i diritti riservati.
85.6072.04/PP/1M/11-18(2-23)/Rev C5